

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

高清晰度液晶监视器

OEV262H

26寸液晶监视器拥有高端的显示技术，
实现奥林巴斯新内镜系统的高清显示潜能。



高清晰度液晶监视器 OE262H



主要特点

- 26 寸全HD的LCD面板，屏幕长宽对比16:9、高亮度、高对比度、及高质量图像。
- FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局。
- 多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出*1，能够同时查看不同的实时图像。
- 各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO。
- 节能设计包括低能消耗、各种节电模式，相对于前代产品*2外形更加轻量化。
- A.I.M.E功能为奥林巴斯内镜系统的高画质提供支持。*3

*1 克隆输出功能用于将显示的HD视频信号(1080i/1080p)，包括PIP/POP图像，输出至另外的监视器和记录设备。

*2 高清晰度液晶监视器OE261H


*3 A.I.M.E(Advanced Image Multiple Enhancer)是一项降低噪点、提高分辨率的功能。

规格

CCC No.: 2014010809686439

液晶面板	屏幕尺寸	26寸	
	显示设备	a-Si TFT active matrix	
	分辨率	1920×1080 点 (全HD)	
	对比率	1400:1	
	长宽比	16:9	
	视角	178° (水平和垂直)	
尺寸	大小	626.8(宽)×395.2(高)×79.6(厚)	
	重量	7.8 kg	
电源需求	LCD监视器	AC IN: 100-240V, 50/60Hz, 0.96-0.47A DC IN: 24V, 3.6A, 5V, 0.03A	
输入	HD/SD	SDI (1)	BNC 接头
		SDI (2)	
	视频	BNC 接头	
	Y/C	小型4针DIN	
	HD15	D-sub 15针	
	DVI (1)	DVI-I 接头	
	DVI (2)	DVI-I 接头	
	Aux in (HD/SD-SDI)	BNC 接头	
输出	HD/SD	SDI (1)	BNC 接头, active-through输出
		SDI (2)	
	视频	BNC 接头, 环通输出, 75Ω自动终接	
	Y/C	小型4针DIN, active-through输出	
	HD15	D-sub 15针, active-through输出	
	DVI (1)	DVI-I 接头, active-through输出	
遥控	克隆输出(3G/HD-SDI)	BNC 接头	
	RS-232C 接头	D-sub 9 针	
	并行遥控	RJ-45	

尺寸

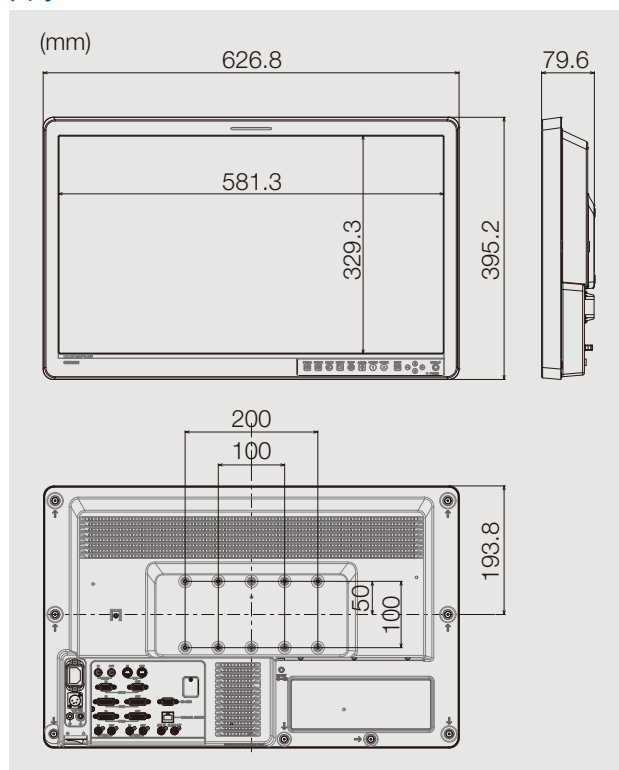

选配的 HD15-BNC4P 电缆“SONY SMF-405”用于将 RGB 信号从 OE262H 连接至 CV-260/CV-260SL。

OLYMPUS®

经销商

成贯仪器(上海)有限公司

Tel.: +86(021)5428 6005
Fax: +86(021)5428 6005-8002
www.tengrant.com

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

北京总部:
北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层
代表电话: 010-58199000

大连分公司:
辽宁省大连市沙河口区黄河路620号现代服务业总部大厦9层E/F
代表电话: 0411-84456084

西安分公司:
陕西省西安市尚德路85号太平洋保险大厦8层801、802
代表电话: 029-87206108

上海分公司:
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心10层
代表电话: 021-51582084

广州分公司:
广州市环市东路403号广州国际电子大厦15层1506室
代表电话: 020-61227171

成都分公司:
四川省成都市锦江区福兴街1号华敏翰尊国际大厦16层
代表电话: 028-86703535

医疗内镜客户服务中心: 400-820-2084

奥林巴斯医疗株式会社

日本本部: 日本国东京都新宿区Shinjuku Monolith

GC0127SV V01-1408